




VC-10420. BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE

MANUAL DE USUARIO

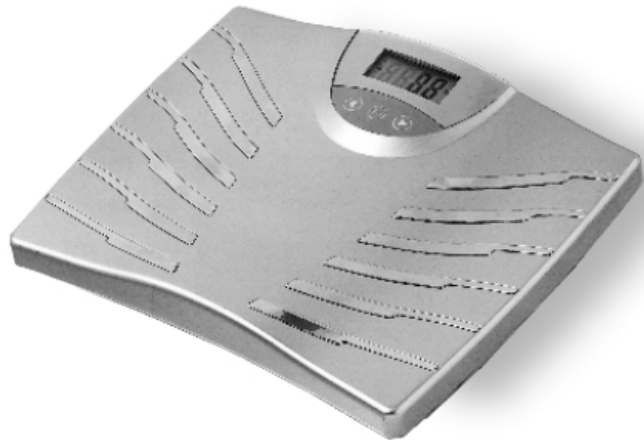

La báscula de baño parlante KERO VC-10420 permite visualizar en la pantalla el peso corporal a la vez que lo anuncia por voz.

Características:

- Anuncio por voz del peso
- Indicación del peso en pantalla
- Peso máximo: 150 Kg
- Peso mínimo detectado: 1 Kg
- Resolución: 100 gramos
- Tolerancia: $\pm 1\%$
- Temperatura óptima de trabajo: 10°C – 40°C
- Apagado automático

Funcionamiento:

Para utilizar su báscula de baño parlante deberá instalar, en primer lugar, la pila de 9 V adjunta. Debe colocarse en el compartimento para la pila situado en la base.

- Para medir el peso corporal:
 - o Presione la báscula con el pie para encenderla. La báscula anunciará : “HOLA”
 - o Deberá esperar algunos segundos para que se inicialice. Una vez lista, anunciará: “BÁSCULA PREPARADA”
 - o Suba en la báscula. La báscula anunciará el peso correspondiente a la vez que aparece en la pantalla
 - o Baje de la báscula. La información del peso permanecerá en la pantalla durante 10 segundos
 - o Transcurridos los diez segundos la báscula se apagará de forma automática anunciando: “ADIOS”
- Apagar la báscula:
 - o La báscula se apagará de forma automática si transcurren diez segundos sin ninguna acción
- Desactivar el anuncio por voz del peso
 - o Si lo desea, puede desactivar el anuncio por voz cambiando la posición del interruptor de la base

Notas importantes:

- En caso de sobre carga, la balanza emitirá tres tonos y la pantalla mostrará “FFFF”
- Cuando la pila esté próxima a agotarse, en la pantalla aparecerá un icono con forma de pila
- Utilice la báscula únicamente sobre superficies rígidas, planas y seguras
- Evite la exposición de la báscula al sol y a fuentes de calor
- Si no va a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo largo, recomendamos que extraiga la pila
- No desmonte la báscula. La garantía perdería automáticamente su validez
- No utilice elementos corrosivos para limpiar la báscula. Basta hacerlo con un paño ligeramente humedecido con agua
- Esta báscula está diseñada para uso residencial

Garantía:

SICSA FUTURO, S.A. garantiza este equipo contra defectos de fabricación por un periodo de dos años. En caso de detectar algún problema, contacte con el punto de venta donde adquirió el equipo. Alternativamente puede enviar el equipo averiado, a portes pagados, a nuestro servicio técnico (no se admitirán equipos enviados a portes debidos):

SICSA FUTURO, S.A
C/ MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA -

La duración de la pila no está cubierta por la garantía.

Los daños ocasionados por un uso indebido o instalación en lugares inadecuados no están cubiertos por la garantía.


La manipulación del aparato por personal no autorizado invalida de forma automática la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, deberá devolver el equipo en su embalaje original y adjunta documento acreditativo de la compra donde figure claramente la fecha de adquisición.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EQUIPO: Báscula personal parlante
MARCA: KERO
MODELO: VC-10420

La báscula personal parlante marca KERO modelo VC-10420 cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 89/336/CE.

Este equipo lleva la marca  como garantía de conformidad con las siguientes normas:

EN 6100-6-3: 2001
EN 55014-2:1997 + A1:2001

SICSA FUTURO, S.A.
C/ MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA -